
蛋白纯化解决方案

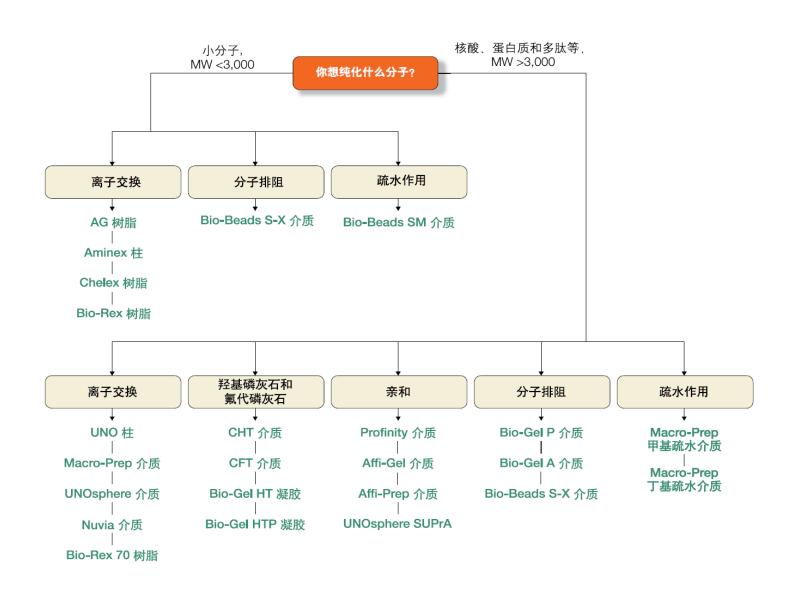

层析介质介绍与选择指南

			_	
1241	~ ~~ +	~~	ш.	- C.
	ーヘアォ	ш	-	٧П
	- X 1	$\overline{}$	77	

阴离子交换	应用范围
AG1	强阴离子,不同交联度的树脂可用于分离低分子量多肽、核苷酸及无机阴
	离子;对氯离子选择性较高;可用于重力流或低压层析系统。
AG MP-1M	强阴离子,巨孔型 AG 1型树脂,用于 MW>1,000,000 分子分离,可用
	于重力流或低压层析系统。
Bio-Rex5 和	弱阴离子,用于去除糖中的有机酸,吸附溶液中的无机酸;可用于重力流
AG4-X4	AG 4-X4 或低压层析系统。
UNO Q	强阴离子,可在高流速下实现高分辨率的生物分子分离; pH 稳定性范围
	为 2-12。
Macro-Prep High	强阴离子,用于高载量的生物分子分离,独特的表面化学特性减少杂质非
Q	特异 High Q 性吸附, pH 稳定性范围为 1-10。

Macro-Prep 25 Q	强阴离子,具有 Macro-Prep High Q介质相似的特性,但 25 μm 微球提
	供更高的分辨率;独特的表面化学特性减少杂质非特异性吸附,pH 稳定
	性范围为1-10。
Macro-Prep	弱阴离子,用于高载量的生物分子分离,独特的表面化学特性减少杂质非
DEAE	特异性 DEAE 吸附, pH 稳定性范围为 1-10。
UNOsphere Q	强阴离子,用于高通量和高载量的生物分子分离,pH 稳定性范围为
	1-14。
Aminex	用于高压分析碳水化合物、糖和有机酸,具有行业标准的性能,见 U.S. 药
	典。
阳离子交换	应用范围
AG 50W	强阳离子,低交联度树脂用于分离多肽和核苷酸,高交联度树脂用于分离
	小肽和金属离子及去除阳离子;可用于重力流或低压层析系统。
AG MP 50	强阳离子,巨孔型 AG 50W 型树脂,用于 MW>1,000,000 分子分离;可
	用于重力流或低压层析系统。
Bio-Rex MSZ 50	强阳离子,具有 AG 50 介质相同的特性,但颗粒大小更均一;650 μm 微
	球体大小使其更适用于大规模的(层析柱或批次)工业级应用。
Bio-Rex 70	弱阳离子,适用于高载量的高分子量(MW>1,000,000)溶质分离,用于
	纯化和分离多肽、蛋白质、酶及其它阳离子分子;适用于大规模纯化。
Chelex100	弱阳离子,鳌合树脂可去除金属离子适用于 PCR 模板制备,并适用于缓
	冲液和离子试剂的超纯化; 可用于重力流或低压层析系统, 提供分子生物
	学级和生物工艺级产品规格。
UNO S	强阳离子,可在高流速下实现高分辨率的生物分子分离,pH 稳定性范围
	为 2-12。
Macro-Prep 25 S	强阳离子,具有 Macro-Prep High Q 介质相似的特性,但 25 μ m 微球体
	能提供更高的分辨率,独特的表面化学特性减少杂质非特异性吸附;pH
	稳定性范围为 1-10。
Macro-Prep High	强阳离子,用于高载量的生物分子分离;独特的表面化学特性减少杂质
S	High S 非特异性吸附, pH 稳定性范围为 1-10。
Macro-Prep CM	弱阳离子,用于高载量的生物分子分离;独特的表面化学特性减少杂质非
	特异性吸附, pH 稳定性范围为 1-10。
UNOsphere S	强阳离子,用于高载量的生物分子分离; pH 稳定性范围为 1-14。
UNOsphere Rapid	强阳离子,具有 UNOsphere S 相似的特性,但其增强的化学特性克服了
S	介质在电导 Rapid S 变化时导致 pH 漂移的缺点,并加快了介质的平衡
	时间; pH 稳定性范围为 1-14。
Nuvia S	强阳离子,具有 UNOsphere S 相似的特性,但介质表面的化学修饰使其
	更适用于高载量的生物分子分离; pH 稳定性范围为 1-14。
混合离子层析	应用范围
AG 11 A8	离子排阻,含有阴离子和阳离子交换位点,可以与游离的离子弱结合用于
	非离子化合物的脱盐,如从蛋白质中去除 SDS 和吸附无机酸。
AG 501-X8	混合床树脂,由等量的 AG 1-X8 和 AG 50W-X8 组成,用于水、尿素、
	甲酰胺和丙烯酰胺等的去离子或脱盐,从而获得超纯试剂。
Bio-Rex MSZ 501	混合床树脂,由等量的 Bio-Rex MSZ 1 和 Bio-Rex MSZ 50 组成;颗粒均

离子交换层析

分子量排阻(凝胶	应用范围
过滤)	
Bio-Gel P 系列	根据分子大小分离,并可用于脱盐或缓冲液置换,提供分子排阻范围从
	100-100,000 多种介质, pH 稳定性范围为 2-10。
Bio-Beads S-X 系	非极性分子量排阻范围为 400-14,000, 可用于分离小分子量的有机多聚
列	物和其它疏水物质。
	过滤) Bio-Gel P 系列 Bio-Beads S-X 系

一的离子交换树脂,可用于水和非电解质的脱盐,特别适合大规模工业使

未他层例	<u>应</u> 出报用
UNOsphere	用于抗体纯化和从大体积细胞培养液中纯化 Fc 融合片段, SUPrA 适用于
SUPrA	工业级单克隆抗体研发及生产。
Affi-Gel protein A	从腹水、血清和培养液中纯化 IgG,低压层析介质。
Affi-Prep protein	从腹水、血清和培养液中纯化 IgG,稳压层析介质。
A	
Affi-Gel 蓝胶	用于去除白蛋白及酶纯化,该介质骨架上共价结合了 Cibacron Blue F3GA
	蓝色染料,用于纯化带有二核苷酸折叠的蛋白质。
DEAE Affi-Gel	用于去除 IgG 中的白蛋白和蛋白酶,Cibacron Blue F3GA 染料共价结合
Blue	至 Blue DEAE Bio-Gel A 上。
CM Affi-Gel Blue	用于去除 IgG 中的白蛋白和蛋白酶,Cibacron Blue F3GA 染料共价结合
	至 CM Bio-Gel A 上。
肝素凝胶	用于纯化凝结因子、胞浆蛋白和多种酶,包括核酸酶、脂酶和蛋白酶,肝
	素可特异性结合多种酶和其它蛋白。
Profinity IMAC	用于带有 His 标签蛋白的纯化。
Profinity GST	用于带有 GST 标签蛋白的纯化。
Profinity eXact	一步法实现亲和纯化和柱上酶切去除融合标签。
Affi-Gel 多粘菌	用于去除内毒素,稳压介质可用 NaOH 消毒。
素介质	
Affi-Gel 硼胶	用于亲和纯化低分子量带有顺式/邻式羟基的分子,并可分离 AMP 和环
	状 AMP。
Profinity	亲和偶联,用于偶联亲核基团,如-OH、-NH ₂ 、-SH,该介质以 UNOsphere
	为骨架,因而具有优良的压力和流动特性。
Affi-Gel 10	亲和偶联,用于偶联-NH2基团,偶联 pI6.5-11 的蛋白质,属低压层析介
	质。
Affi-Gel 15	亲和偶联,用于偶联-NH2 基团,偶联 pI<6.5 的蛋白质,属低压层析介
	质。
Affi-Gel Hz	亲和偶联,通过抗体 Fc 段偶联 IgG 分子。
Affi-Gel 102	通过 EDAC 碳二亚胺亲和偶联带有 -COOH 的配基。
羟基磷灰石和氟	应用范围
代羟基磷灰石	
CHT I 型	用于抗体纯化(与 II 型相比载量较高)、纯化或去除病毒、纯化或去除
	DNA、去除多聚体和内毒素及 Fab 纯化。
CHT II 型	用于抗体纯化,白蛋白去除及 Fab 纯化。
CFT I 型和 II 型	具有与 CHT 相似的特性,但在低 pH(5.5) 值时较 CHT 稳定,适用于
	Fab 纯化。
Bio-Gel HT	用于纯化蛋白质、核酸和其它多种生物分子;晶体状羟基磷灰石,与 CHT
	陶瓷羟基磷灰石机械稳定性不同。
Bio-Gel HTP	与 Bio-Gel HT 相似,粉末状。
DNA 纯	与 Bio-Gel HTP 相似,但颗粒大小更细,选择性结合 dsDNA;可用于分
Bio-Gel HTP	离 Bio-Gel HTP ssDNA 和 dsDNA。
疏水层析介质	应用范围
Macro-Prep 甲基	根据蛋白质的相对疏水性分离,pH 稳定性范围为 1-10。
HIC 介质	

Macro-Prep t-丁 根据蛋白质的相对疏水性分离,pH 稳定性范围为 1-10。

亲和层析

亲和层析 应用范围

羟基磷灰石 氟代羟基磷灰石

疏水层析

基 HIC 介质

广州誉维生物科技仪器有限公司创立于2002年,是一家由归国留学生创办,主要经营生物研发科学用品,仪器,耗材的高科技企业。公司目前专注于生物技术仪器的研发,生产和市场销售,致力于为客户提供优质的服务和先进的生物科技仪器,同时也为用户提供实验室系统的解决方案。

广州誉维生物科技仪器有限公司是一个充满生机和蓬勃发展的企业。我们以亲切、开放、严谨的公司文化和科学规范的管理,凝聚着大量的优秀人才,誉维生物拥有由优秀的职业经理人组成的管理团队和由资深生物专家组成的技术团队,他们在产品开发、推广和维护方面默契合作,深刻理解"以客户需求为中心"的含义,将"服务质量"贯穿于公司运作和管理的每一个细节,赢得客户广泛的信任和支持。

公司成立以来,经过公司各个部门的努力奋斗,先后取得了很多成绩,例如连续三年荣获颇尔 PALL 最佳销售奖,THERMO FISHER finnpipette 特约维修中心(华南地区唯一被承认者),博日独家代理商.

我们坚信,只要以市场为导向,以创新为动力,以质量求生存,以发展求壮大,我们就一定会赢得更好的明天。

目前公司已代理多个国际著名生物公司产品:

- 1 美国 PALL 滤器、滤膜、层析填料、超滤、超纯水系统;
- 2 美国 BIO-RAD 蛋白、核酸纯化试剂、电泳耗材、PCR 耗材、层析柱及介质;
- 3 美国 Thermo(原芬兰雷勃) 移液器: Nalgene-NUNC 消耗品:
- 4 上海天能电泳系统、凝胶图像系统;
- 5 厦门锐思捷纯水系统、超纯水系统;
- 6 杭州博日 PCR 仪、恒温金属浴等生命科学仪器;
- 7 北京京君龙磁力搅拌器、摇床等。



广州誉维生物科技仪器有限公司

GUANGZHOU EWELL BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD.

地址:广州市天河区科韵路16号信息港C1栋505室

电话: (020) 85541889 85541890 传真: (020) 85541891 邮编: 510665

http://www.ewell.com.cn