

# 使用说明书



产品标准号      YZB/鲁 0110-2011 医用冰箱

## 澳柯玛医用冰箱

---

- |           |           |
|-----------|-----------|
| ■ YCD-265 | ■ YCD-175 |
| ■ YCD-223 | ■ YCD-165 |
| ■ YCD-213 | ■ YCD-128 |
| ■ YCD-208 | ■ YCD-108 |
| ■ YCD-199 |           |

产品使用前请仔细阅读使用说明书,  
妥善保管以备以后查阅!  
为保证安全使用,  
产品使用前请务必去掉所有包装物!

一、主要特点	1
二、结构简图	1
三、使用环境条件	2
四、搬运、放置注意事项	2
五、安全注意事项	3
六、控制板功能介绍	5
七、初次使用说明	7
八、性能介绍	8
九、物品的放置	9
十、除霜	9
十一、维护保养与清洁	9
十二、冷藏照明灯及其更改、提示注意	10
十三、下列现象并非故障	11
十四、常见故障及排除方法	12
十五、主要技术参数	12
十六、电气原理图	13
十七、装箱单	13
十七、保修说明	14
十七、保修证	15

## 注意！

1. 使用前请去掉所有包装物；
2. 请严格按照本说明书要求搬运、放置本产品，具体内容请详见第二页中“四：搬运、放置注意事项”；
3. 搬运或移动本产品，须静置 30 分钟后，方可接通电源；
4. 本产品具有压缩机延时保护功能，通电 3 分钟后，本产品压缩机工作运行；
5. 本产品须连续通电 3-4 小时，待箱内温度稳定在设定温度后，方可分批存放物品，严禁一次存放物品过多，以免造成冷冻不足；
6. 本产品必须由专人负责，每天检查并记录运行情况，防止出现意外情况，确保安全使用。
7. 出厂时参数已设置好，如需调整参数请详细阅读使用说明书！

### 一、产品主要特点

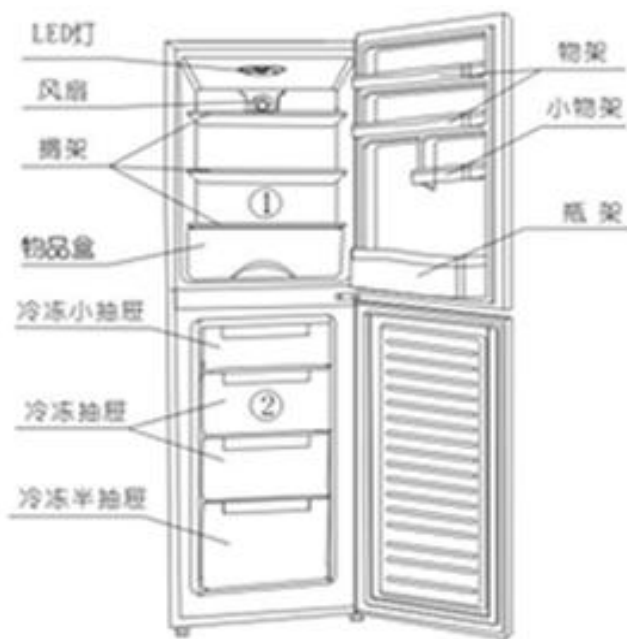
产品采用立式结构，主要由制冷系统、保温箱体门体、电气系统三部分组成，性能如下：

1. 采用电脑智能温控，LCD 屏幕数字温度显示，可根据需要随时调节箱内温度，使制冷效果时刻保持优良
2. 可视声光报警，具有高温报警、低温报警、传感器故障报警等多种报警功能。
3. 带门锁，流线造型，外观庄重大方。
4. 在 10℃~32℃ 环境温度状况下，温度范围：冷藏室 5℃（2-8）、冷冻室 -18℃（-10~20）。
5. 冷藏室根据需要，可以独立关闭。
6. 全无氟技术：采用无氟制冷系统及发泡技术，有利于环境保护。
7. 冷藏室底部装有排水孔，清洁时更为方便。
8. 电源：AC187~242V 50±1 Hz。
9. 轻按智能控制键就可进入最佳温度匹配设定，无需手动调节，省心省力。
10. LED 照明系统，更加安全、节能。

### 产品适用范围

医用冰箱，适用于冰箱有效容积内工作温度不高于 15℃、主要用于物品的医用检验、低温储藏、温度试验、工业测试和科学研究等用途的医用、工业、科研等试验类类似用途的冰箱。适用于医院、血站、卫生防疫站、科研院所等部门使用。

### 二：结构简图产品



注：①区为冷藏室，②区为冷冻室（YCD-128/YCD-108 产品①区为冷冻室，②区为冷藏室）

若图中部件与实物不符，请以实物为准。

由于产品的改进和产品系列化，您所得到的产品可能与本说明书图示不完全一致，谨此致歉！

## 使用说明

### 三：使用环境条件

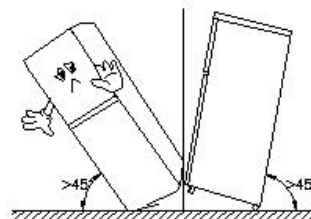
本设备是按照下列条件设计的。

1. 室内使用，在环境温度 10~32℃ 下，最大环境相对湿度 65%，海拔高度不高于 2000 米。
2. 主电源电压波动不超过额定电压的  $\pm 10\%$ ，插头作为断开装置，设备不要放置在难以操作断开装置的位置、要插拔方便，长期不用、维修时要拔掉电源。
3. 严禁在水中或过于潮湿的环境中使用；严禁在高温、强电磁干扰、强腐蚀环境中使用、注意远离火源。
4. 如果不按生产制造厂家规定方法使用设备，则可能损害设备所提供的防护。
5. 由制造商规定的另外的电源电压波动范围。

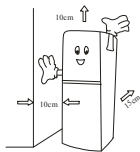
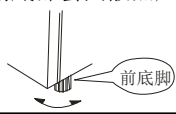
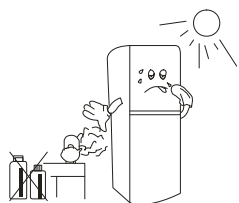
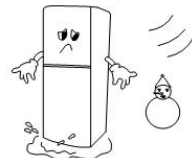
### 四：搬运、放置注意事项

#### 1. 搬运

- ◆ 产品应装在包装箱内运输，箱体与地面的倾斜角不小于 45 度角。
- ◆ 搬运时从底部抬起，轻搬轻放，千万不可倒置横放。
- ◆ 切不可将门及门把手作为受力部件。
- ◆ 室内移动冰箱，可将冰箱的两个后脚轮为轴倾斜，使后脚轮滚动进行短距离移动。

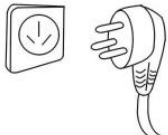
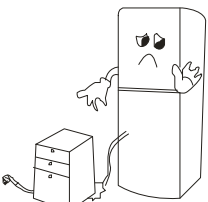
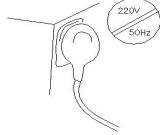
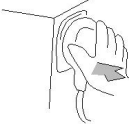
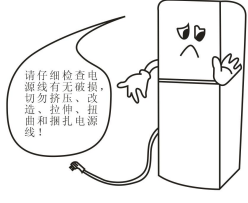
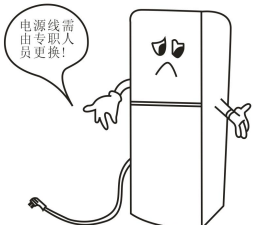

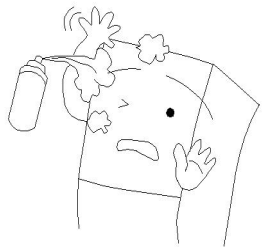


#### 2. 放置



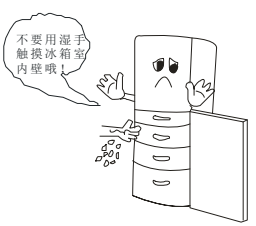
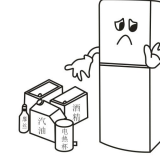

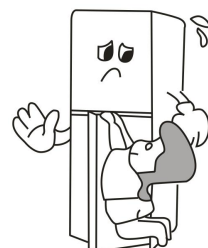

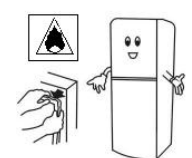
<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 冰箱应放在通风良好的地方，冰箱顶部及两侧必须各留出 10 厘米以上空间，背部要留出 15 厘米以上的空间，以利于空气流通。</li></ul> 	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 放置的地面应平坦坚固，若放置不稳，可调整前底脚使冰箱平稳。</li><li>◆ 略微调高冰箱前部，有利于冰箱关门。</li><li>◆ 在地毯、聚酯地板上放置时，应在底部铺垫木板，否则底部会因散热产生变色、褪色。</li></ul> 
<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 远离热源。避免阳光直射，远离打火灶等。</li><li>◆ 避免与汽油、烯料、煤气等接触，否则会发生危险。</li></ul> 	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 避免放置在潮湿或可能溅到水的地方，以防止生锈或削弱绝缘效果。</li><li>◆ 避免放置在温度太低的环境中。</li></ul> 

## 使用说明

### 五：安全注意事项

<p>◆ 必须使用单独的三相电源插座及合适的保险丝，与其它电器共用插座会引起高热起火。</p> 	<p>◆ 电源线不要被冰箱自身或其它重物压住，以免损坏电源线，发生意外。</p> <p>◆ 冰箱背后不要挤住电源插头。</p> 
<p>◆ 电源电压要求为187~242V之间，若电源条件不符合要求，需加500W以上的稳压器。</p> 	<p>◆ 插入插头时，要用力插紧，使插头与插孔接触良好；</p> <p>◆ 拔电源线插头时应手持插头，不得拉拔电源线，以防插头内松动或断线。</p> 
<p>◆ 切勿使用松弛的电源线、插头、插座。</p> <p>◆ 使用前请仔细检查电源线有无破损，切勿挤压、改造、拉伸、扭曲和捆扎电源线，以防漏电起火。</p> 	<p>◆ 如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或维修部或类似的专职人员来更换。</p> 
<p>◆ 煤气用具泄漏或周围有其它可燃性气体时，不要触动箱体或插座，要先关好气阀，并开窗换气，以免引起爆炸。</p> 	<p>◆ 不要在冰箱附近使用可燃性喷剂！</p> 

## 使用说明

<p>◆请勿在冰箱箱顶上放置盛水容器及不稳定重物，当心重物影响冰箱稳定性，发生意外事故。</p> <p>◆冰箱箱顶上不要放置和使用稳压器、微波炉等电器。</p> 	<p>◆请勿向冰箱外侧和箱内直接溅水，可能会引起漏电及故障。</p> 
<p>◆勿用湿手触摸箱体内壁，否则会冻伤皮肤。</p> <p>。 不要用湿手触摸冰箱内壁哦！</p> 	<p>◆严禁存放易燃、易爆、易挥发物品，如酒精、橡胶水、汽油、苯、丙烷气体等。</p> <p>◆不得在冰箱内使用电器。</p> 
<p>◆冰箱不能存放活物、鲜花等对温度要求严格的物品。</p> <p>爱莫能助！</p> 	<p>◆不要让小孩子在门上或钻进箱内玩耍，以防危险。</p> 
<p>◆有焦糊味时应拔下电源线，停止使用，查明故障，或与当地销售服务商联系。</p> <p>◆切勿擅自拆卸、修理和改造本产品，有引起火灾或使其工作异常的可能性。</p> 	<p>冰箱废弃处理：</p> <p>◆要拆下门封条，以防止幼儿被误关在里面。</p> <p>◆发泡层、制冷剂材料为可燃物，废弃时应确保其远离火源。</p> 

### 六：控制板功能介绍：

#### ◆ 初次接通电源

1. 冰箱初次接通电源，处于智能状态（冷藏5℃、冷冻-18℃），智能指示灯亮，温度显示窗口分别显示冷藏和冷冻的设置温度；  
不进入速冻；按键处在解锁状态，液晶显示屏右下角显示“UL”解锁图标。
2. 若进行温度设定调节，请参考本页“◆温度调节”详细内容。

#### ◆温度调节

★按“选择”键3秒，按键解锁，按键解锁“UL”图标闪烁，



## 使用说明

进入设定状态。

★每按一次“选择”键，在冷藏设定状态、冷藏停设定状态、冷冻设定状态、智能设定状态、速冻设定状态、假日设定状态、时钟小时设置状态、时钟分钟设置状态之间依次循环切换。

### 1. 锁定功能：

a. 当完成最后一次按键操作 8 秒钟后，按键锁定，“UL”解锁图

标变为温室显示，存储档位模式设置信息，温度显示窗口分别显示冷藏和冷冻的室内温度。

b. 在设定状态下，其他按键不起作用；当按“选择”键 3 秒钟以上，按键解锁“UL”解锁图标闪烁，进入冷藏室温度设定状态。

### 2. 冷藏室温度设定：

举例说明冷藏室温度设定操作程序：

例：将冷藏室内温度由 8℃ 更改为 5℃，操作步骤如下：

序号	操作说明	按键操作	操作后显示状态
1	/	/	显示冷藏室内温度
2	按键解锁	按“选择”键 3 秒以上	“UL”图标闪烁显示
3	选定“冷藏室温度”项	按“选择”键切换	闪烁显示“8℃”
4	调至“5℃”	按“√”键	闪烁显示“5℃”
5	保存并退出设定状态	按“确定”键	“冷藏室温度”不闪烁显示
6	8 秒后键盘锁定	——	显示冷藏室内温度

注：冷藏室温度设定范围 0℃~10℃。

冷藏室停机时，风扇 3 分钟后停止转动。

### 3. 冷藏停设定：冷藏室停设定操作步骤如下：

序号	操作说明	按键操作	操作后显示状态
1	/	/	显示冷藏室内温度
2	按键解锁	按“选择”键 3 秒以上	“UL”图标闪烁显示
3	选定“冷藏室停”项	按“选择”键切换	闪烁显示“冷藏室停”
4	保存并退出设定状态	按“确定”键	不显示冷藏室内温度
5	8 秒后键盘锁定	——	显示“冷藏室停”

当设定冷藏室温度时，冷藏停设定状态自动解除。

★冷藏停设定前，请将冷藏室内的贮存物品转移到其它符合贮存温度要求的地方存储。

### 4. 冷冻室温度设定：

举例说明冷冻室温度设定操作步骤如下：

例：将冷冻室内温度由 -15℃ 更改为 -16℃，操作步骤如下：

序号	操作说明	按键操作	操作后显示状态
1	/	/	显示冷冻室内温度
2	按键解锁	按“选择”键 3 秒以上	“UL”图标闪烁显示
3	选定“冷冻室温度”项	按“选择”键切换	闪烁显示“-15℃”
4	调至“-16℃”	按“√”键	闪烁显示“-16℃”
5	保存并退出设定状态	按“确定”键	“冷冻室温度”不闪烁显示
6	8 秒后键盘锁定	——	显示冷冻室内温度

## 使用说明

### 5. 速冻设定:

举例说明冷冻室速冻设定操作步骤如下:

例: 将冷冻室强制速冻时间设定为 24 小时, 操作步骤如下:

**★冷冻室调为“速冻”状态后, 冷冻室内温度有可能低于温度设定值!**

序号	操作说明	按键操作	操作后显示状态
1	/	/	显示冷冻室内温度
2	按键解锁	按“选择”键 3 秒以上	“UL”图标闪烁显示
3	选定“速冻”项	按“选择”键切换	闪烁显示“速冻”、“冷冻室温度”、“速冻时间”
4	调至“24”小时	按“∧”键	闪烁显示“24”小时
5	保存并退出设定状态	按“确定”键	不显示闪烁“冷冻时间”
6	8 秒后键盘锁定	/	显示“冷冻室温度”、“速冻”字样、“速冻时间”字样

注意:

1. 冷冻室温度设定范围为-15℃~-25℃。
2. 速冻时间分别有 6 小时、12 小时、18 小时、24 小时。

### ◆时间设定功能:

举例说明时间设定操作步骤如下:

例: 将时间由 07: 40 更改为 08: 20, 操作步骤如下:

序号	操作说明	按键操作	操作后显示状态
1	/	/	显示时间“07: 40”
2	按键解锁	按“选择”键 3 秒以上	“UL”图标闪烁显示
3	选择“时”数字	按“选择”键	“07”闪烁显示
4	小时调至“08”	按“∧”键	“08”闪烁显示
5	保存并退出设定状态	按“确定”键	“UL”图标闪烁显示
6	选择“分”数字	按“选择”键	“40”闪烁显示
7	分种调至“20”	按“∨”键	“20”闪烁显示
8	保存并退出设定状态	按“确定”键	“UL”图标闪烁显示
9	8 秒后键盘锁定	/	显示时间“08: 20”

### ◆假日功能

1. 在假日功能状态下, 冷藏室/冷冻箱分别设置 16℃~-16℃, 同时根据环境温度做调整。
2. 在设定状态下, 按动“选择”键, “假日”字样闪烁显示。温度显示窗口冷藏显示 16℃, 冷冻显示-16℃, 按“选择”键接受假日设定。
3. 在假日模式下, 任意设定冷藏室或冷冻室温度后, 即退出假日模式。



## 使用说明

### ◆报警功能:

报警状态	故障原因	显示状态	蜂鸣器状态
高温	冷藏室、冷冻室内温度高出设定值 3℃	闪烁显示温度	发出“叮咚”声音
低温	冷藏室内温度低于设定值 3℃ 冷冻室内温度低于设定值 5℃	闪烁显示温度	发出“叮咚”声音
传感器故障	冷藏室、冷冻室、室温传感器短路或断路	闪烁显示“E0”	发出“叮咚”声音
	冷藏蒸发器传感器短路或断路	闪烁显示“EF”	发出“叮咚”声音
开门	冷藏室的门打开时间超过 3 分钟	/	发出“叮咚”声音

在报警状态下，同时按动“选择”+“√”，蜂鸣器报警声音取消。

### ◆断电记忆功能

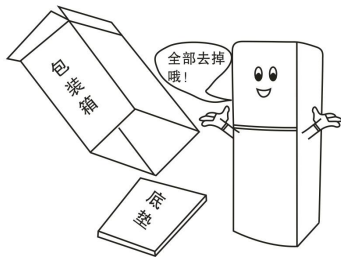
1. 当按键锁定后，工作状态被锁定，来电后仍按断电前的设定模式工作，时间需重新调整。

### ◆显示设定


1. 背光源超过 5 分钟，无任何按键操作，自动熄灭。
2. 按任何一键或开冷藏门，则背光源亮。

## 七：初次使用说明

- ◆拆除所有的包装组件，包括泡沫底垫及固定附件所用的胶带等。



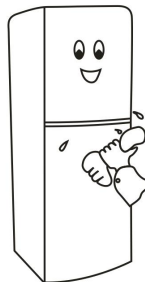- ◆将冰箱安放在合适的位置；
- ◆确保断开电源后；温水内加入少量中性洗涤剂，用抹布蘸少量温水擦洗冰箱各处，并擦干（电器部分只能用干布擦）。




## 使用说明

◆静置约 30 分钟后，可将插头接到专用电源插座，冰箱开始工作。打开冷藏室门照明灯亮，关闭箱门熄灭。



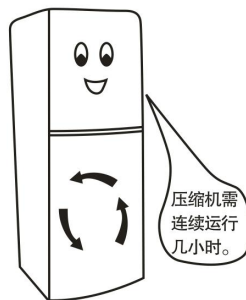◆通常要运行 3~4 小时左右，待冰箱完全冷却后再放入物品，在此之前尽量少开箱门。



## 八：性能简介

### 1. 冷藏功能

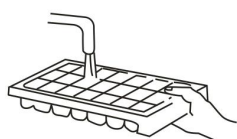
- ◆ 冷藏室适宜存放需要冷藏保存的物品。
- ◆ 瓶装物品可以放在冷藏门上的物架、瓶架内。
- ◆ 零散类物品可以放在物品盒内。
- ◆ 体积较大的物品可以放在搁板上，搁板可根据需要调节高度。

### 2. 冷冻功能

- ◆ 冷冻室用于贮存冷冻物品或冻结的物品，贮存期较长，但应遵守物品包装上注明的贮藏时间。
- ◆ 将物品分成小份，这样容易冻透，也可方便化冻。
- ◆ 一次性放入冷冻室的物品不宜过多，一般不要超过该冰箱的冷冻能力标准。
- ◆ 需要快速冷冻物品时，把物品放入冷冻室内，在操作面板上按“速冻”键，（具体操作参照第 5 页《◆温度调节》详细内容）

### 3. 制冰方法


制冰方法：先向冰盒内注水（图 A），然后将带水的冰盒放入冷冻室中。待制冰完成后将冰取出（图 B），为防止冰盒损坏，请勿如图 C 所示弯曲冰盒。



图A

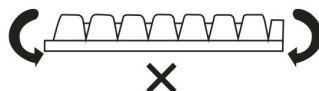
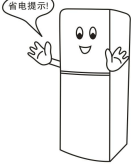

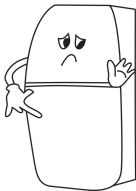


图B



图C

### 九：物品的放置

<p>◆冷藏室内的物品应放在保鲜袋或有盖容器内，防止物品内水分蒸发。</p> 	<p>◆为了省电，应尽量减少开门次数和开门时间，门要关紧。并根据需要调节箱内温度，切勿过冷。</p> <p>省电提示</p> 
<p>◆勿将物品或器皿贴在冷藏室的后壁上，以免物品冻结。</p> 	<p>◆摆放物品不应过于紧密，以免影响冷空气循环。</p> 

### 十：除霜

#### ★冷藏室除霜

冷藏室为自动化霜，壁上所凝结水珠会通过背部靠下一排水孔随时排出，利用压缩机发热量自然蒸发。堵塞时，可用带护套的金属丝通一通排水管，除去积在排水管内的杂物。

#### ★冷冻室除霜

1. 冰箱工作一段时间后，其冷冻蒸发器表面、冷冻室内表面以及抽屉表面会结霜，从而影响制冷效果，增加耗电。当霜层厚度大于 5mm 时，应进行除霜。
2. 冷冻室除霜：切断电源。打开箱门，将贮存物品转移到其它符合贮存温度要求的地方存储；抽出空抽屉除霜并擦洗干净。化霜完毕，擦干室壁，运行正常后，将物品有序放回。

### 十一：维护保养与清洁

#### 定期适当保养可以延长冰箱使用寿命。保养冰箱前务必要拔下电源插头！

1. 拔下电源线插头或短时间停电时，要等 5 分钟后再接通电源，否则会影响压缩机寿命，甚至造成损坏。
2. 每隔一段时间应清理冰箱内部(最好趁除霜时)，可先用清洁的软布蘸温水加中性洗涤剂擦一遍，然后用清水擦洗，最后用干布擦净。

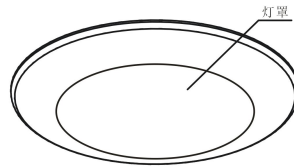
注意：严禁用水直接冲洗冰箱外表面，以免影响电气绝缘性能。严禁用研磨粉、洗衣粉、碱性洗涤剂、酒精（乙醇、甲醇等有机溶剂）、汽油、酸、腐蚀性清洁剂、硬刷等擦洗。

3. 经常清除冰箱背后、左右两侧板及箱体背后护罩上的尘埃，以提高散热效率，保持通风良好。

4. 冰箱长期停用时，应先切断电源，取出箱内一切物品，将箱内外清理干净，敞開箱门数日，使箱内充分干燥，并散掉异味。停用过程中按时开机运转几次。（建议尽可能不要长时间停机）。

### 十二：冷藏照明灯及其更换

1. 照明灯为 LED 灯，该灯能耗低，寿命长。
2. 若有异常请联系售后人员上门维修。



### 提示！

冷冻室最上层抽屉温度较其他抽屉温度相对偏高 1~2℃，对温度要求严格的物品尽量放置在其他抽屉中。

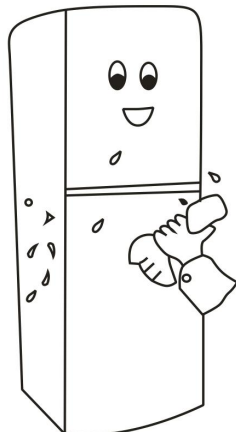
任何产品都有出现故障的可能，为避免机器在发生故障时给您造成损失，请按以下方法执行：

- 1、本产品不能安装在狭小密闭的空间，放置房间的门体不能太小，至少应保证本产品的正常进出，以避免在机器发生故障时造成维修困难，无法及时修复，造成储存物品损坏。
- 2、本产品应由专人负责，每天检查运行状况并形成记录，遇到机器故障或停电时，请先对照说明书进行处理，如果短时间内不能修复或供电，请将储存物品转移到其它符合储存温度要求的地方存储，避免造成物品损坏，并请及时通知我公司售后服务部门进行处理。
- 3、将储存物品放入本产品储存前，应预先确认储存物品要求的温度与本产品的温度范围相符合，以免因本产品的温度不符合物品所要求的温度而导致储存物品损坏，造成损失。
- 4、由于制冷惯性，箱内各部分温度有一定差异，实际显示温度与设定温度也可能有一定差异，此为正常现象。

### 十三：下列现象并非故障

◆ 周围环境过于潮湿如梅雨季节时，冰箱表面可能产生凝露现象，并非故障，用布擦干即可。

◆ 周围环境过于潮湿如梅雨季节时，若开门使用频繁，偶尔出现箱底接水盒溢出现象，并非故障。



◆ 冰箱工作时听到箱内有流水声，这属于正常现象。

-冰箱开机、停机时会有类似的声音。

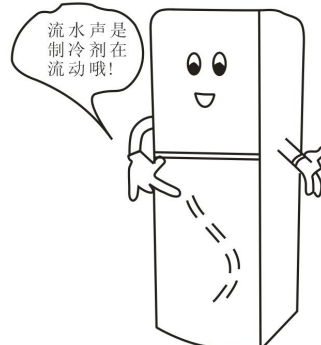
-制冷系统制冷剂流动的声音。

-制冷系统制冷剂蒸发的声音。

-由于热胀冷缩制冷系统管路会发出“啪啪”的声音

-冰箱开、停机时启动继电器等电气件会发出“咔嗒”

声。



## 使用说明与提示注意

<p>◆ 冰箱两侧发热</p> <p>-冰箱工作时，箱体两侧有冷凝器散热会使箱体发热，这属于正常现象。</p> <p>-冰箱冷冻室外沿发热，是内藏式防露管用来防止产生凝露。</p>	<p>◆ 冷藏室内壁结霜</p> <p>-冷藏室内壁附有水珠或少量冰，是由于经常或长时间开门，或含水份多的物品存放时没有包装起来。</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

### 十四：常见故障及排除方法

<p>完全不制冷</p>	是否停电	通电
	保护器或保险丝是否断开	更换保险丝（在电源板上）
	电源插座有电，电源插头未	插牢插头
<p>制冷温度不够</p>	物品温度过热或摆放拥挤	冷却后放入，减少放入量
	频繁开门或门未关紧	关紧门
	受阳光照射或靠近热源	远离热源位置
	周围通风不好	留出周围通风间距
	结霜过多	除霜
<p>冷藏室物品冻结</p>	设定温度过低	重新设定温度
	物品太靠近后背冷源	物品与后背保持一定距离
<p>冷藏室灯不亮</p>	照明灯出现问题	请与售后人员联系更换
<p>噪音大</p>	地板基盘软，箱体倾斜	底下铺垫木板
	底脚或底脚轮落地不实	调整底脚螺钉
	箱体接触墙壁	远离墙壁
	箱体周围接触其它物品产生振动音	清除周围异物

※出现故障时请对照检查，如发现制冷剂缺失、灯管损坏、风扇坏请立即联系售后服务进行维修。

※若查明上述事项后仍不能解决时，请切断冰箱电源，清洗冰箱内表面，用布擦干；并及时与离您最近的我公司特别维修点联系或直接拨售后服务电话。切不可私自拆卸维修。

※若出现温度不符合贮存要求的故障，请确认是否很快排除故障，若确定短时间内无法解决，请把箱内物品转移到其它符合贮存温度要求的地方存放，以免造成物品的损坏。

※ 除上述故障外，必须由厂家指定售后服务系统维修，更换保险丝时必须由专业维修人员完成。

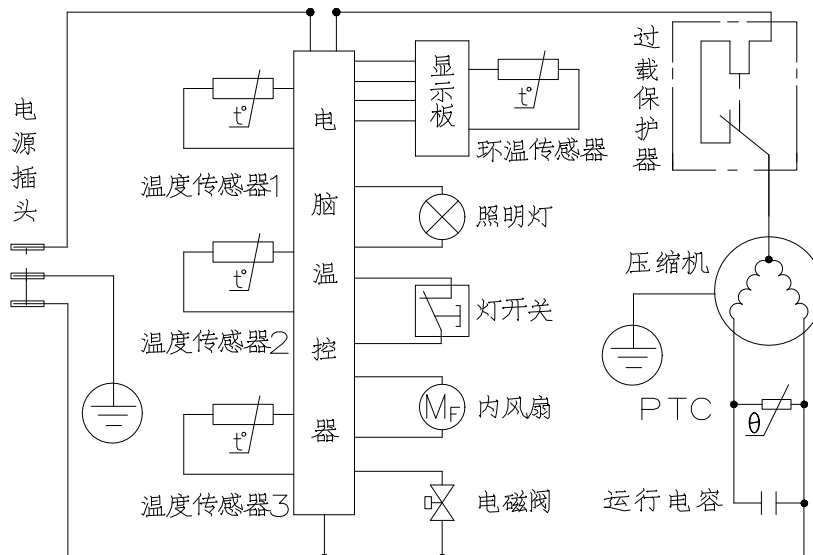
## 使用说明与技术参数

### 十五：主要技术参数

型号	YCD-265	YCD-223	YCD-213	YCD-208	YCD-199
气候类型	SN N ST	SN N ST	SN N ST	SN N ST	SN N ST
防触电保护等级	I	I	I	I	I
总有效容积 (L)	265	223	213	208	199
冷冻室有效容积 (L)	105	90	90	70	80
额定电压 (V)	220~	220~	220~	220~	220~
额定电流 (A)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
额定频率 (Hz)	50	50	50	50	50
型号	YCD-175	YCD-165	YCD-128	YCD-108	/
气候类型	SN N ST	SN N ST	SN N ST	SN N ST	/
防触电保护等级	I	I	I	I	/
总有效容积 (L)	175	165	128	108	/
冷冻室有效容积 (L)	65	65	38	38	/
额定电压 (V)	220~	220~	220~	220~	/
额定电流 (A)	0.6	0.6	0.6	0.6	/
额定频率 (Hz)	50	50	50	50	/

敬告：本产品将不断改进，各参数如有变动，请以冰箱背部铭牌为准。

### 十六：电气原理图



## 十七：装箱单

型号	YCD-265	YCD-223	YCD-213	YCD-208	YCD-199
搁架	3	3	3	3	3
物品盒	1	1	1	1	1
物架	2	2	1	1	1
小物架	1	/	1	1	1
瓶架	1	1	1	1	1
冷冻小抽屉	1	1	1	1	/
冷冻抽屉	2	2	2	2	2
冷冻半抽屉	1	1	1	1	1
冰盒	1	1	1	1	1
使用说明书	1	1	1	1	1
型号	YCD-175	YCD-165	YCD-128	YCD-108	/
搁架	3	3	4	3	/
物品盒	1	1	1	1	/
物架	2	2	2	3	/
小物架	1	/	/	/	/
瓶架	1	1	/	/	/
冷冻小抽屉	1	1	/	/	/
冷冻抽屉	2	2	/	/	/
冷冻半抽屉	1	1	/	/	/
冰盒	1	1	1	1	/
使用说明书	1	1	1	1	/

保修说明

此处由维修部填写，用户保存，不做结算用。

故障现象：
处理结果：
维修日期：
维修人员签字：

故障现象：
处理结果：
维修日期：
维修人员签字：

故障现象：
处理结果：
维修日期：
维修人员签字：

结算凭证联（一）	
产品型号：	产品编号：
购买日期：	维修日期：
用户盖章（签字）：	维修人员签字：
（此联为维修人员的结算凭证联）	

结算凭证联（二）	
产品型号：	产品编号：
购买日期：	维修日期：
用户盖章（签字）：	维修人员签字：
（此联为维修人员的结算凭证联）	

结算凭证联（三）	
产品型号：	产品编号：
购买日期：	维修日期：
用户盖章（签字）：	维修人员签字：
（此联为维修人员的结算凭证联）	



## 保修说明

### 保修证

为便于查询，请将位于产品铭牌上的产品型号和出厂号抄在下表中。

产品型号		产品编号	
------	--	------	--

为避免放置丢失或一时找不到，增加您在维修中的麻烦，您可将购买发票粘贴在本页上面。

# 贴发票处

### 保修证使用说明

尊敬的用户：

感谢您使用澳柯玛产品。凭此保修证及发票，自出售之日起（以发票为准）我公司将为您提供下列服务：

- 1、 整机免费包修一年；
- 2、 主要零部件（包括压缩机、蒸发器、冷凝器、过滤器、毛细管、温控器、电磁阀、主控板、风扇电机）免费包修三年。
- 3、 属下列情况之一者，不属免费服务范围，实行收费修理：
  - （1） 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的；
  - （2） 非本公司指定特约维修部拆动造成损坏的；
  - （3） 无保修证及有效发票的；
  - （4） 产品与保修证及发票不符或修改的；
  - （5） 因不可抗力造成损失的；
  - （6） 保修期满的。